

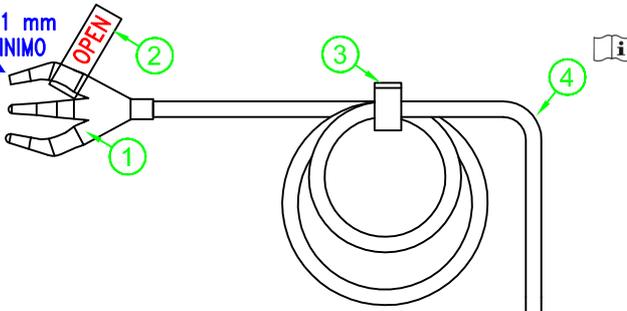
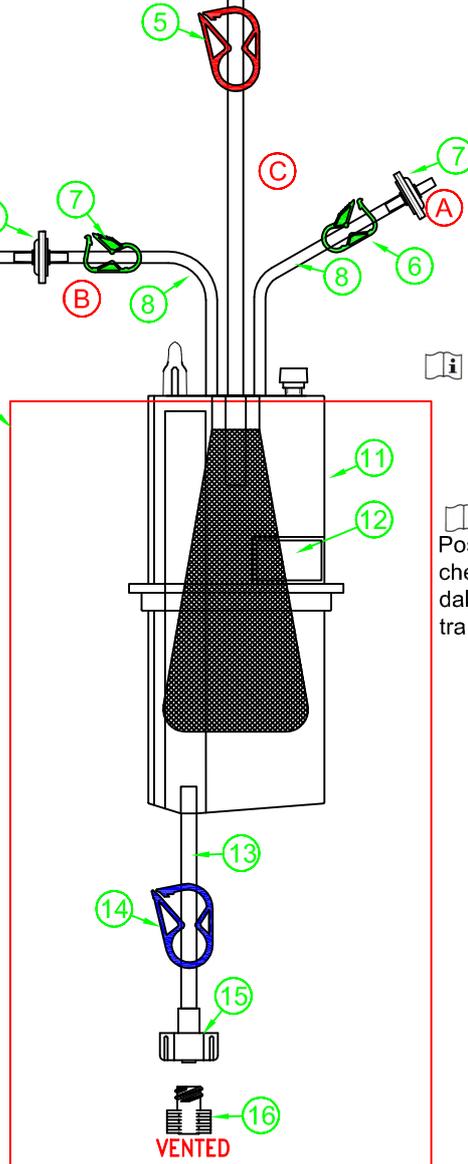


TAGLIARE LA CHELA DI 1 mm
PER AVERE UN FORO MINIMO

VENTED

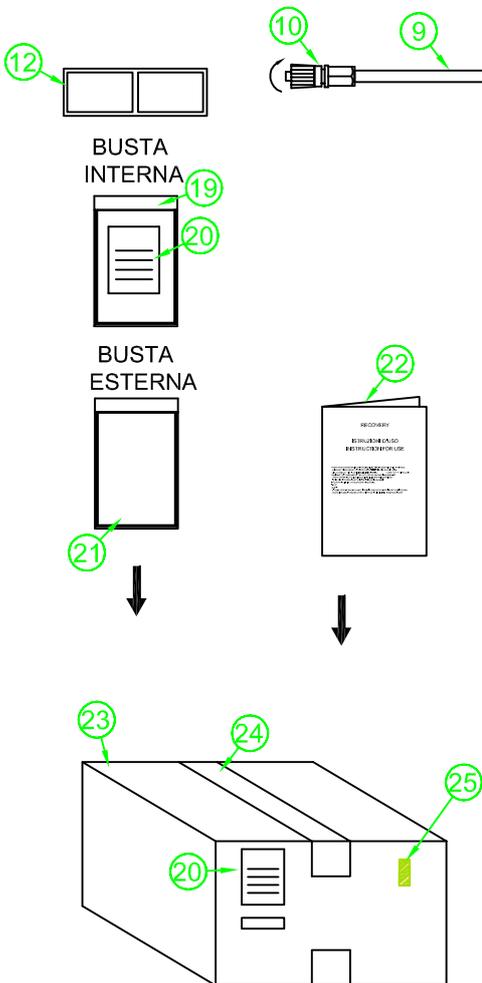

Avvolgere il tubo con la chela in modo circolare e chiuderlo con il gancetto (part. 3) e appoggiarlo sopra il sacchetto in PE (part. 18)

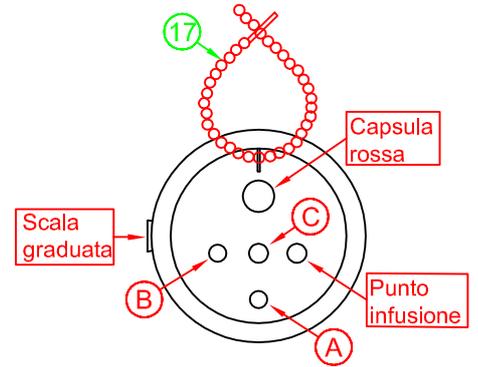

Fissare il sacchetto in PE (part. 18) sull'estremità superiore del Barilotto con nastro virale (fare asola) avendo cura di lasciare sporgenti i 3 tubi

Posizionare l'etichetta (part. 12) che va sul barilotto a circa 1 cm dalla scala graduata posizionata tra 500 e 600 ml

Note produttive

DISEGNATO/DRAWN	R. Vincenzi	DATA/DATE	11/09/2013	SCALA/SCALE	//	TOLLERANZA/TOLL.	//
CONTROLLATO/CHECKED	F. Sgarbi	DATA/DATE	11/09/2013	APPROVATO/APPROVED	F. Schittini	DATA/DATE	11/09/2013
DESCRIZIONE/DESCRIPTION	RECOVERY 800 ml Post operative autotransfusion kit					CODICE/CODE	5000010
						MODULO N°	21
Via Maestri del Lavoro n° 5 41036 Medolla (MO) - ITALY e-mail: emotec@emotec.it						REV.	01
Questo disegno e' di proprietà di EMOTEC e non può essere trasmesso a terzi senza autorizzazione This document belongs to EMOTEC: it must not be communicated to other people without authorization.							